


EasyDrill®

Cranial Perforator



M I C R O M A R
INSPIRED BY LIFE

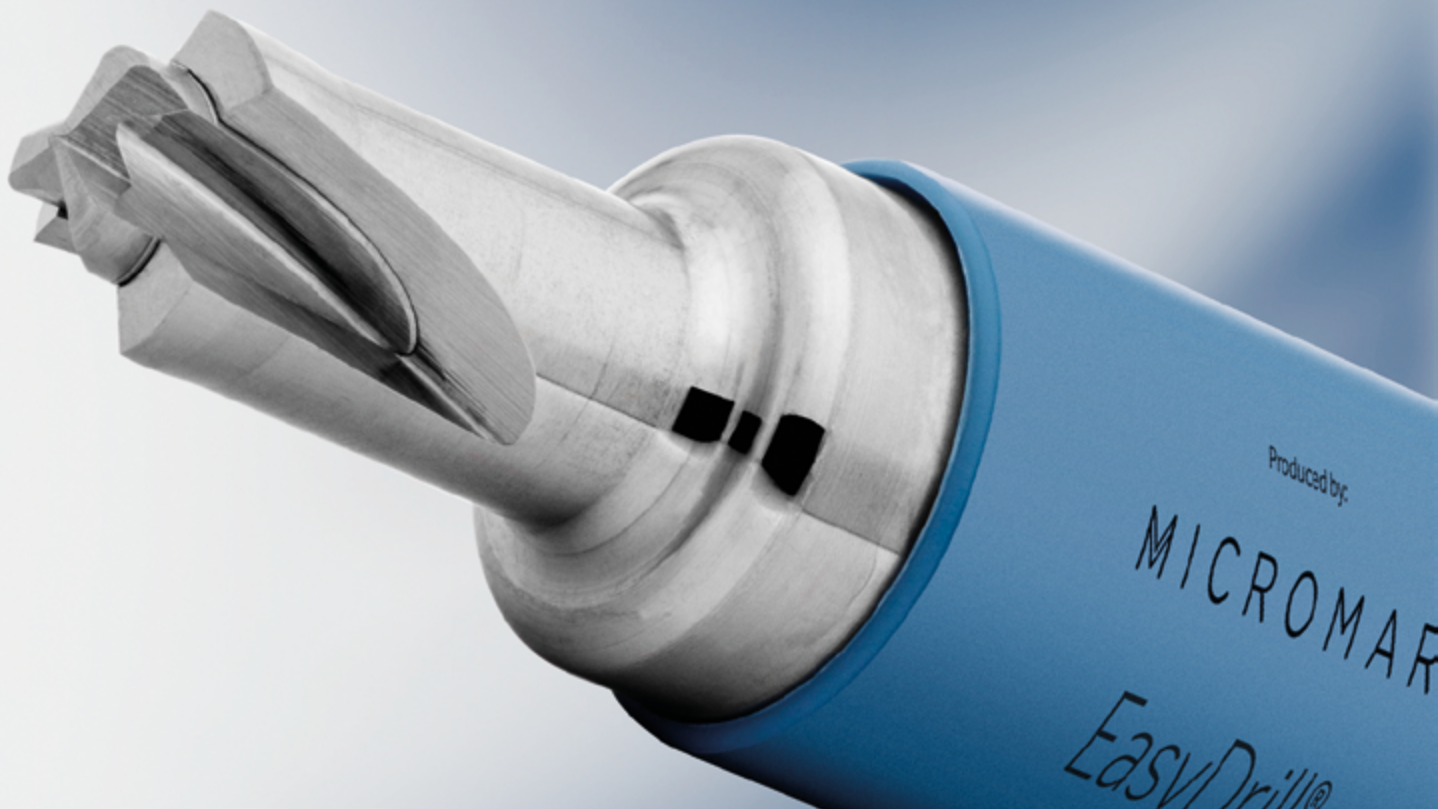

CE | FDA*

4 AÑOS DE VALIDEZ

EasyDrill® Corte eficaz combinado con alta tecnología.

Con base en un amplio trabajo de investigación y desarrollo, Micromar ha utilizado toda su tradición en la neurocirugía para crear sus Brocas EasyDrill®.

Proyectadas para utilización con conexiones Hudson, proporciona beneficios tales como:

- Tecnología Autostop;
- Geometría de corte única – perforaciones rápidas y suaves;
- Punta antideslizante – mayor estabilidad y precisión;
- Probadas individualmente;
- Distribuidas mundialmente por Medtronic®.

*Información relativa a los códigos EasyDrill® específicos para exportación.



Punta antideslizante permite un accionamiento estable y evita que EasyDrill® se deslice sobre el cráneo.

¡Estabilidad desde el principio!



Dura protection

El exclusivo mecanismo patentado de liberación del gatillo se ha desarrollado para satisfacer las estrictas normas de calidad y las necesidades de los neurocirujanos.

El sistema de parada automática de EasyDrill® minimiza el riesgo de penetración peligrosa en la duramadre, lo que permite una perforación más rápida y segura.



Cód.	BA0008FAA	BA0011FAA	BA0210FAA	BA0010FAA
Diám. Externo y Interno	9/6 Ø	11/7 Ø	14/11 Ø	14/11 Ø
Espesor Craneal	 3 mm	 3 mm	 1,5 mm	 3 mm

Control de calidad y almacenaje



Las Brocas para perforación craneal EasyDrill® Micromar tienen un estricto control de calidad, en el que cada fresa se prueba previamente antes de ser empaquetada y puesta a disposición para la cirugía.

- Embalaje dedicado;
- Manual completo siguiendo normativas internacionales;
- Ya esterilizado – ahorro de tiempo en el procedimiento quirúrgico;
- Etiquetado con código de barras para facilitar el control de inventario;
- Completa trazabilidad de los productos en campo.

Distribuidor Principal:



M I C R O M A R
INSPIRED BY LIFE

ESP - VER: 08 - 08/05/2024. Todos los derechos reservados.

Las imágenes utilizadas en este catálogo son meramente ilustrativas. Versión en vigor del catálogo disponible en nuestro sitio web.
Consulte la disponibilidad y el distribuidor oficial en su región. REGISTRO ANVISA: 80051250022

Micromar Ind. Com. Ltda.

Av. Marginal ao Córrego da Serraria, nº 168

CEP: 09980-390

Diadema · São Paulo · Brasil

+55 11 4057-5722

international@micromar.com

 micromar.com

 facebook.com/micromar

 instagram.com/micromarneurosurgery

 linkedin.com/company/micromar